



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

***DEAMBULATORE A 3 RUOTE
ROLLATOR WITH 3 WHEELS
DÉAMBULATEUR 3 ROUES
ROLLATOR MED 3 HJUL***



Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

INTRODUKTION

Syftet med denna manual är att ge instruktioner för en normal och korrekt användning av hjälpmedlet av både patienten och hans/hennes assistent/följeslagare.

AVSEDD ANVÄNDNING

Rollatorn har utformats och tillverkats för att användas inomhus av patienter med otillräcklig användning/stöd av de nedre extremiteterna. Den har avsikten att ge stöd till kroppen som, använd med båda armarna, bidrar till eller tillåter rörligheten som annars skulle vara omöjlig eller nedsatt.

OBS! Rollatorn är i första hand avsedd för inomhusanvändning och på plana ytor. Om det skulle vara nödvändigt att använda denna rollator utomhus, rekommenderar vi att iaktta trafikreglerna, som vilken fotgängare som helst.

UNDERHÅLL

Rollatorn kräver inte något särskilt underhåll för det ordinarie underhållet. Vi rekommenderar emellertid att regelbundet utföra:


- en kontroll av de olika komponenternas integritet
- kontroll att skruvar och muttrar är väl åtdragna
- kontroll av de mekaniska delarna i rörelse och, om nödvändigt, att smörja dem.
- rengöring med neutralt rengöringsmedel (använd inte frätande eller skadliga produkter) och lagring i en torr och genomluftad miljö.

VARNINGAR!


Använd inte hjälpmedlet om du upptäcker skador eller avsaknad av delar. Använd inte för annorlunda avsikter än de för vilka detta hjälpmedel har projekterats. Kör inte över hinder eller på ojämna eller inte plana golv eller på golv som är våta eller hala. Användningen av anordningen avråds för personer med nedsatt funktion av händer eller armar.

Maximal belastning 100kg

MONTERINGSINSTRUKTIONER

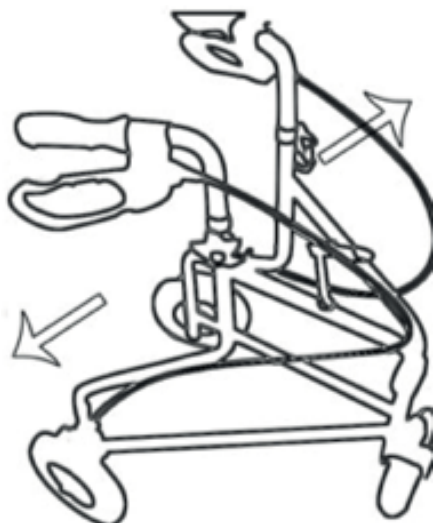

Steg 1:
öppna den hopvikta "ramen", i riktningen som visas på bilden

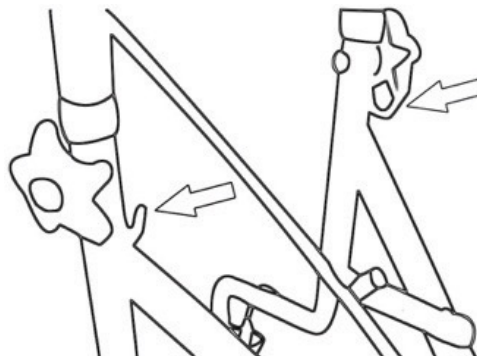

Steg 2:
häng upp korgen på krokarna



Steg 3:
placera handtagets rör omkring ramens två sidor, justera produkten till lämplig höjd och lås muttern. Försök att skjuta på rollatorn, kontrollera bromsens tillförlitlighet, justera den korrekt beroende på personens egenskaper.

	Tillverkare		Förvara på svalt och torrt ställe
	Läs bruksanvisningen		Skyddas från solljus
REF	Produktkod	CE	Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745
LOT	Satsnummer		Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga
MD	Medicinteknisk produkt		

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

REF 43140



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

