



PHILIPS

Hjärtåterupplivning
Philips FRx

**Leder vägen
till att rädda liv**

SIDA VID SIDA, STEG FÖR STEG:

Designad för den vanliga människan i det ovanliga ögonblicket

Philips FRx defibrillatorn beter sig som din personliga handledare och vägleder dig genom processen att behandla en människa med plötsligt hjärtstillestånd.

FRx vägleder i realtid med enkla, stegvisa röstkommandon och HLR-rådgivning.

Philips FRx leder hjälparen genom en enkel stegvis process med tydliga och anpassade röstinstruktioner. Apparaten kan friktionsfritt anpassa sig till hjälparens expertisnivå, vilket tillåter även den mest oerfarna hjälparen att rädda liv i en nödsituation.






SPARA TID. RÄDDA LIV:

Snabba elstötar för att förbättra behandlingsresultatet

Europeiska återupplivningsrådet rekommenderar att man aldrig avbryter HLR för mer än 10 sekunder (återupplivningsriktlinjerna). Med en tid till strömstöt som är bara 8 sekunder, är Philips FRx bland de snabbaste att tillge elstötbehandling efter HLR-perioder.

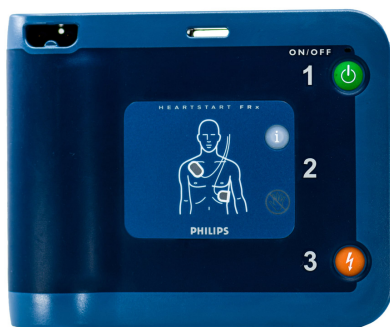

PERSONLIG BEHANDLING

För förbättrade resultat för varje patient

FRx kontrollerar automatiskt att en elstöt är nödvändig och att den rätta, personliga behandlingen är given före man kan tillge en elstöt.

Om man installerar SMART Pads Cartridge för spädbarn/barn, kommer defibrillatorn att automatiskt anpassa sig till en lägre energinivå och anpassa vägledningsinstruktionerna enligt HLR hjälp åt barn.



RUGGED (IP55) OCH PÅLITLIG

Redo att användas då du behöver den

FRx är robust och tål även hårdhänt hantering, extrema temperaturer och dammiga eller våta miljöer. Rigorös testande inkluderar belastning upp till 500 kg (1100 lbs.), och fall från 1,22 m (4 ft.).

Denna defibrillator med lågt underhåll är enkel, pålitlig och robust. Den utför mer än 85 självtester varje månad, varje vecka och dagligen (inklusive att elektroderna fungerar korrekt). Om ett självtest misslyckas, kvittrar apparater högljutt för att varna att den inte mera är användningsduglig. Genom att trycka på den blå knappen, berättar apparater vad du bör göra.

Dess omfattande självtestrutiner och höga varningar gör att du kan lita på att Philips FRx alltid är redo att gå om det behövs.



PHILIPS LEDER HJÄRTSTARTARINDUSTRIN:

Innovation är ett varumärke för Philips – mer än 2 miljoner hjärtstartare sålda runt världen

”Jag är stolt över vår långa och framgångsrika historia gällande automatiska hjärtstartare, även kända som AEDs, vilka har hjälpt att rädda liv varje dag de senaste två årtionden, långa och framgångsrika historia. Idag, 3 juli 2019, har vi uppnått den otroliga milstolpen av att ha sålt totalt två miljoner defibrillatorer runtom i världen, och vi kommer att fortsätta med vårt uppfinnande och förse våra kunder med pålitlig, lättanvänd, livräddande teknologi.

Frans Van Houten – CEO, Philips



För mer information om tekniska specifikationer eller för att köpa en Philips-defibrillator, ombuds du kontakta MediStore AB, AED360's auktoriserade återförsäljare i Sverige.

Ring + 46 (8) 406 06 60 eller mejla oss på: info@medistore.se.

MediStore AB

Stormbyvägen 2-4

163 55 Spånga

Sverige

<https://medistore.se>